

BaByliss[®]
PARIS



Homelight 100

Quartz technology - LIFETIME 100 000 flashes**



Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat



G934E

További információkért
Szkenelje be

Tartalomjegyzék

1. Figyelmeztetés	6
1.1. NE HASZNÁLJA a Homelight epilátort természetesen sötét bőrön.	6
1.2. NE HASZNÁLJA a Homelight készüléket leburnult bőrön, vagy közvetlenül napozás után!	6
1.3. NE HASZNÁLJA a Homelight epilátort a szemek környékén.	7
1.4. NE HASZNÁLJA az epilátort, ha a szőrszájai fehérek, szürkék vagy szőkék.	7
2. Ellenjavallatok	7
3. Elővigyázatosság a teljesen biztonságos használathoz	8
4. Esetleg előforduló mellékhatások	12
5. A Homelight epilátor bemutatása	14
5.1. Tartós szőrtelenítési módszer Homelight epilátorral.	14
5.2. A szőrtelenítés megtervezése	16
5.3. A szőrtelenítés várható eredményei	17
5.4. A Homelight készülék leírása	18
5.5. Quartz technológia	18
5.6. Biztonság a Homelight epilátorral	18
6. A Homelight epilátor használata	20
6.1. Az erősségi fokozatot ÓVATOSAN válassza meg!	20
6.2. Készítse fel a bőrt a kezelésre	22
6.3. A Homelight készülék telepítése és beállítása	22
6.4. Használati módok	23
AZONNAL SZÜNTESSÉ BE a kezelést, ha a bőrön égés vagy hólyag látható!	25
6.5. Az arc szőrtelenítése a Homelight epilátorral	25
6.6. A szőrtelenítés megközelítő időtartama	26
6.7. Mire számíthat a Homelight epilátor használatakor?	26
6.8. A Homelight. epilátorral végzett kezelés után	26
7. A Homelight készülék karbantartása	27
7.2. A Homelight epilátor működési ideje	27
8. Hibaelhárítás	28
8.1. A Homelight epilátor nem működik	28
8.2. Nincs impulzus a kioldó lenyomásakor	28
9. Ügyfélszolgálat	29
10. Gyakran ismételt kérdések	30
11. Műszaki adatok	33
12. Csomagolás - Címkzés	33

A BaByliss által gyártott Homelight epilátor nagy teljesítményű elektromos készülék, és mint ilyen, biztonsági okokból elővigyázatosan kell használni.

Mielőtt a Homelight epilátort első alkalommal használná, kérjük, olvassa végig ezt a használati útmutatót, különös figyelmet szentelve a használat során alkalmazandó óvintézkedésekre és biztonsági előírásokra.



Tartsa távol a szemétől és a villanás alatt ne nézze kezelt területet!

Feltétlenül használja a mellékelt védőszemüveget a Homelight epilátorral végzett kezelés alatt.



A BaByliss Homelight epilátor használata a mellékelt védőszemüveg viselése nélkül súlyos megsérüléseket okozhat.



A Homelight készüléket ne használja leburnult bőrön, vagy közvetlenül napozás után! Használata így súlyos égési sérüléseket, illetve komoly bőrkárosodást okozhat.

Ne használja a Homelight epilátort természetesen sötét bőrön!



A Homelight készülék használata előtt olvassa el és szigorúan tartsa be a BaByliss biztonságosságra vonatkozó valamennyi figyelmeztetését és utasítását.

Megjegyzés: A Homelight készülék kevésbé hatékony fakó, illetve világos szőrzet esetén.

Azt javasoljuk, hogy a Homelight epilátor minden használata előtt olvassa át ismét ezt a felhasználói kézikönyvet.



A Homelight epilátor nagy teljesítményű elektromos készülék, és mint ilyen, biztonsági okokból elővigyázatosan kell használni.

Olvassa el és a Homelight készülék használatakor szigorúan tartsa be a biztonságosságra vonatkozó valamennyi tudnivalót és figyelmeztetést.

1. Figyelmeztetés

Fontos biztonsági figyelmeztetések, használat előtt – feltétlenül olvassa el

A Homelight epilátor használata nem felel meg mindenkinek. Használat előtt olvassa feltétlenül el az alábbi utasításokat. További kiegészítő információkat, illetve személyre szabott tanácsokat honlapunkon, A www.babylliss.com címen, illetve az Ön lakóhelye szerint illetékes forgalmazó honlapján talál.

Végezetül, amennyiben kétségei vannak a Homelight epilátor használatát illetően, kérjük, forduljon bőrgyógyászához vagy kezelőorvosához.

1.1. NE HASZNÁLJA a Homelight epilátort természetes sötét bőrön.

A Homelight epilátor a szőrszál pigmenseire szelektív módon hatva szabadítja meg a nem kívánt szőrszálaktól. Az egyén bőrében lévő pigmensek mennyisége határozza meg a színt, de a kockázatot is, amikor fényepilálási módszert választ, független attól, hogy melyiket. Minél sötétebb a bőr, annál nagyobb a kockázat.

A sötét bőli Homelight epilátorral történő kezelése mellékhatásokkal járhat, például égést, hólyagosodást és a bőr színének elváltozását (hiper- vagy hipopigmentáció) okozhatja.



NE HASZNÁLJA a Homelight készüléket természetes sötét bőrön!

1.2. NE HASZNÁLJA a Homelight készüléket leburnult bőrön, vagy közvetlenül napozás után!

Ha közvetlenül napozás utáni bőrön használja a Homelight készüléket, mellékhatásokkal járhat, például égést, hólyagosodást és a bőr színének elváltozását (hiper- vagy hipopigmentáció) okozhatja.



NE HASZNÁLJA a Homelight készüléket leburnult, illetve nemrég napsütés hatásának kitett bőr esetén! Használata így súlyos égési sérüléseket, illetve komoly bőrkárosodást okozhat. Használata így súlyos égési sérüléseket, illetve komoly bőrkárosodást okozhat.

1.3. NE HASZNÁLJA a Homelight epilátort a szemek környékén.

Ha a BaByliss Homelight epilátor készülék impulzusa a szemre irányul, súlyos szemsérülést okozhat. A készülék nem alkalmas szempilla vagy szemöldök epilálására.



Tartsa távol a szemektől!

Kérjük, viselje a mellékelt védőszemüveget a Homelight epilátorral végzett kezelés közben.

1.4. NE HASZNÁLJA az epilátort, ha a szőrszálai fehérek, szürkék vagy szőkék.

A Homelight készülék nem hatékony a fehér, szürke vagy szőke szőrszálakra. Ha az Ön szőrzete ilyen színű, megtörténhet, hogy a Homelight készülék használata Önnek nem felel meg.

Megjegyzés: a szőrszálak színe változó lehet a test különböző részein is. A kezelt területtől és a szőrszálak színétől függően előfordulhat, hogy változó eredményt tapasztal.

2. Ellenjavallatok

A Homelight epilátor használata átmenetileg ellenjavallt bizonyos feltételek esetén. NE HASZNÁLJA a Homelight készüléket, ha az alábbi esetek bármelyike is fennáll:

- Terhesség vagy szoptatás.
- Erős napozás vagy UV berendezés hatása érte a legutóbbi 28 napon belül. Tetoválás vagy állandó smink van a kezelendő területen.
- A kezelendő bőr rendellenes állapota esetén: Barna vagy fekete foltok, nagy szeplőfoltok, anyajegyek, szemölcsök és festékes bőrnövedékek.
- Ekcéma, pikkelysömör, sérülések, nyílt sebek, vagy a kezelendő zónán terjedő fertőzés. A Homelight készüléket csak azután lehet használni, miután az érintett testrészt meggyógyult.
- Keloid-képződéssel járó előzmények, ismert érzékenység fénnel szemben (fényérzékenység) vagy gyógyszerrel szemben, ideértve a nem szteroid alapú gyulladáscsökkentőket (például: aszpirinek, ibuprofének, acetaminofen), tetraciklinek, fenotiazinok, tiazidok, diurétikumok, szulfonilureák, szulfamidok, DTIC, fluorouracil, vinblasztin, grizeofulvin, alfa-hidroxi savak (AHA-k), béta-hidroxi savak (ABH-k), Retin-A⁺, Accutane[®] vagy topikus retinoidok.

- Nemrég lefolytatott, illetve folyamatban lévő, alfa-hidroxi savval (AHA), béta-hidroxi savval (BHA), Retin-A®, helyileg retinoidokkal vagy azelainsavval végzett kezelés.
- A bőr rendellenes állapota például cukorbetegség, vagy egyéb szisztémás vagy metabolikus betegség következtében.
- Accutane® (isotretinoin) alapú kezelés az utóbbi 6 hónap leforgása alatt. Szteroid alapú étrend az utóbbi 3 hónap leforgása alatt.
- A kezelendő területen korábbi herpesz jelenléte, kivéve, ha orvoshoz fordult és kapott megelőző kezelést a Homelight epilátor használata előtt.
- Epilepszia.
- Működő implantátum, például szívritmus-szabályozó, vizeletinkontinencia elleni implantátum, inzulinpumpa, stb. Fényérzékenységhöz kapcsolódó betegség, például porfiria, polimorf kiütés fény hatására, napsütés okozta csalánkiütés, lupus stb.
- A bőr korábbi rákos megbetegedése, vagy rosszindulatú bőrbetegségek által érintett területek. Sugárterápia vagy kemoterápia az utóbbi 3 hónap leforgása alatt.
- Minden egyéb eset, amikor az orvosa kockázatosnak ítéli a kezelést.

Ha a legkisebb kétsége is felmerül, hogy Önt érintik a fenti kockázatok a Homelight készülék használatával kapcsolatban, forduljon kezelőorvosához vagy bőrgyógyászához.

3. Elővigyázatosság a teljesen biztonságos használatához

Kérjük, szigorúan tartsa be a kézikönyvben leírt előírásokat a Homelight epilátoros kezelések erősségének kiválasztását illetően.

A nem megfelelő intenzitás kiválasztása mellékhatásokat válthat ki.

Az erősség kiválasztására vonatkozó részletes útmutatásokat lásd a „Homelight epilátor használata” bekezdés „Az erősségi szint ELŐVIGYÁZATOS kiválasztása pont alatt.

Kerülje el a mellékhatásokat!

Ne kezelje a bőr azonos területét egymás után egy szőrtelenítési alkalommal!

Kerülje az impulzusátfedést!

AZONNAL ÁLLÍTSA LE A KEZELÉST, ha égési sebek, illetve felhólyagzások mutatkoznak!

Kerülje a Homelight epilátor használata utáni szövődményeket!

- A kezelt területeket ne tegye ki napsugár hatásának.
„A napsugarak hatásának kitenni” azt jelenti, hogy védelem nélkül, közvetlenül van kitéve a napsugarak hatásának megszakítás nélkül mintegy tizenöt percen át, illetve védelem nélkül közvetett napsugárzás hatásának van kitéve folyamatosan egy órán keresztül.
Kerülje a napsugarak hatását védekezés nélkül a Homelight epilátorral történő kezelést megelőző 4 hét, illetve a kezelést követő 2 hét alatt.
Megfelelő védelmet, így például fedő ruházatot, vagy (50-nél nagyobb napvédő faktorral rendelkező) napvédő krémet kell rendszeresen használnia a kezelést megelőző és követő 3 hét alatt.
Figyelem! Fontos, hogy ugyanezeket az előírásokat tartsa be szoláriumokban használt UV hatása esetén.
Ha önbarnító krémet használt a bőrre, kérjük, várja meg a krém barnító hatásának teljes megszűnését, mielőtt a készüléket használja.
- Gondoskodjon mindig a kezelendő testrészt szintbe hozásáról és győződjön meg a bőr alkalmasságáról mielőtt a Homelight készüléket használná.
- Kérjük, takarja le az anyajegyeket és tetoválásokat a Homelight epilátor használata közben, továbbá takarja le a barna és fekete foltokat, szeplőket, szemölcsöket vagy bármilyen bőrkinövését is, mielőtt a Homelight epilátort használja.
- Soha ne nézzen közvetlenül a villanólámpából kilépő fényre. Kérjük, használja a Homelight epilátorral végzett kezelés közben a mellékelt védőszemüveget.
- Ne használja a Homelight epilátort a mellbimbókra és a nemi szervekre (férfi vagy női egyaránt).
- Ne használja a Homelight epilátort a test olyan részén, ahol később szeretné, hogy szőrök növekedjenek.
- Ne használja a Homelight epilátort a szőrtelenítésen kívül egyéb célokra.
- Soha ne irányítsa a Homelight epilátor alkalmazási felületét úgy, hogy nyílt térbe bocsásson ki fényimpulzust. Impulzus kibocsátása előtt mindig győződjön meg arról, hogy a kezelőfelület a bőrre irányul, és teljesen érintkezik a felhámmal.
- Legyen óvatos a meleg felületekkel. Ne érjen hozzá az ujjával a különleges arcszűrő lencséjéhez, vagy a fénykibocsátó felülethez. Ügyeljen arra is, hogy a különleges arcszűrő és a fénykibocsátó felület tiszta maradjon. A Homelight epilátor tisztításával és karbantartásával kapcsolatban olvassa el a 7.1. pontot.

- Soha ne használjon gyúlékony folyadékot, például alkoholt (ideértve a kölnit, dezodort vagy más, alkoholt tartalmazó anyagot), illetve acetont a bőr tisztítására a Homelight epilátor használata előtt. A Homelight készülék használata átmeneti pigmentációválozást idézhet elő (lásd alább az „Esetleges mellékhatások” című fejezetet).
- Tartsa távol a készüléket a gyermekektől. Ne használja a Homelight epilátort gyermekeknél és ne engedje meg a gyermekeknek a készülék használatát.
- Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (és gyerekek), illetve tapasztalatlan vagy megfelelő ismeretek nélküli személyek használják, kivéve akkor, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak és a készülék használatára vonatkozó előzetes útmutatásokat kaptak tőle. Ügyeljen a gyerekekre, hogy ne játszhassanak a készülékkel.



FIGYELEM! : A terméket tartalmazó polietilén zacskó, illetve ennek csomagolása veszélyes lehet. Ezeket a zacskókat csecsemőktől távol kell tartani. Ne használja őket bölcsőben, gyerekágyban, babakocsiban vagy járókában. A vékony fólia az orrhoz és a szájhoz tapadhat, és akadályozza a légzést. A zacskó nem játékszer.



Amennyiben fürdőszobában használja a készüléket, ügyeljen arra, hogy húzza ki a konnektorból használat után. Vízforrás közelsége ugyanis akkor is veszélyes lehet, ha a készülék ki van kapcsolva. A kiegészítő védelem érdekében a fürdőszoba áramellátására szolgáló áramkörbe ajánlott 30 mA -t nem meghaladó differenciál áramvédő kapcsolót beépíteni. Kérjen tanácsot egy villanyszerelőtől.



TOVÁBB MÁR NEM HASZNÁLHATÓ ELEKTRONIKUS ÉS ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK
Mindannyiunk érdekében, valamint a környezet védelmében kifejtett közös erőfeszítésben való részvétel érdekében: Ne dobja ki ezeket a termékeket a háztartási hulladékokkal együtt.

Vegye igénybe az országában rendelkezésre álló visszavételi és begyűjtő rendszereket. Egyes anyagok így újrafeldolgozhatók vagy hasznosíthatók lehetnek.

- Ne használja a készüléket, ha leesett, vagy sérülések nyoma látható rajta.
- Csak a BabyLiss által ajánlott tartozékokat használjon.

Mint minden elektromos eszköznél, biztonsága érdekében bizonyos elővigyázatosságra van szükség a Homelight epilátor használata közben.

- Tartsa távol a Homelight epilátort minden vízforrástól!
- A Homelight epilátor elektromos készülék, soha nem szabad vízzel érintkeznie.

- Ne tegye a Homelight epilátort olyan helyre, ahol beleeshet vagy belekerülhet a fürdőkádba vagy mosdóba, vagy bármilyen egyéb, vizet tartalmazó helyre. Ne tegye vízbe, vagy más folyadékba. Ez súlyos áramütést okozhat.
- Ne használja a Homelight epilátort fürdés közben.
- Ne használja a Homelight készüléket nedves vagy vizes környezetben.
- Ne nyúljon a vízbe esett Homelight epilátor után.
- Ha vízbe esett, azonnal húzza ki a Homelight készüléket a konnektorból.



Tartsa távol a Homelight epilátort minden vízforrástól!

- Ne próbálja meg felnyitni, vagy saját maga megjavítani a Homelight készüléket. A készülék felnyitásával veszélyes elektromos alkatrészeknek és a fényimpulzus energiájának teszi ki magát, ami súlyos sérüléseket és / vagy gyógyíthatatlan szemkárosodást eredményezhet.



Ne próbálja meg felnyitni, vagy saját maga javítani a Homelight epilátort. A készülék javítását csak a BaByliss által engedélyezett szervizek végezhetik.

- Ha készüléke eltört, sérült, vagy javításra szorul, kérjük, forduljon a Homelight epilátor szakszervizéhez.
- A Homelight epilátort csak rendeltetésszerűen, és az ebben a kézikönyvben szereplő előírások maradéktalan betartásával használja.
- A konnektorba bedugott készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül.
- Soha ne hagyja a bekapcsolt Homelight epilátort felügyelet nélkül.
- Ne csatlakoztassa a hálózatra a Homelight epilátort, ha az adapter kábele vagy a csatlakozóaljzat sérült.
- Szüntesse be a készülék használatát, ha bármely rendellenességet tapasztal, ha hiba mutatkozik, illetve ha abnormális zaj vagy szag adja elő magát. Különösen akkor szüntesse be azonnal a készülék használatát, ha a villanólámpán repedés vagy folt mutatkozik.
- Ha az „ON/OFF/READY” jelzőfény pirosra vált, ne használja tovább a készüléket, és húzza ki az adaptert a konnektorból.
- Használat után azonnal húzza ki az Homelight készülék adapterét a konnektorból.
- Húzza ki konnektorból a Homelight készüléket, amikor tisztítja.
- Ne használjon olyan tartozékot, illetve alkatrészt a Homelight készülékéhez, amelyet nem a BaByliss ajánlott.
- Kizárólag a készülékhez mellékelt adapterrel használja.

4. Esetleg előforduló mellékhatások

Amennyiben a Homelight epilátort az előírások betartásával használja, mellékhatás és szövődmény ritkán fordul elő. Azonban minden kozmetikai kezelés, még az otthoni használatra szánt kezelés is bizonyos kockázattal járnak. Ezért fontos, hogy megértse és elfogadja ezeket a kockázatokat és az esetleges szövődményeket, ha házi használatra tervezett, villanófényvel működő, szőrtelenítő rendszert használja.

Ha az impulzusok átfedik egymást, illetve ha ismételten ugyanarra a területre bocsát ki impulzusokat:

Mellékhatások	Mellékhatás megnyilvánulása
A bőr enyhe irritációja/ kellemetlen érzés a bőrön	Enyhe
Bőrpír	Enyhe
A bőr túlérzékenysége	Enyhe
Égési sebek vagy sérülések	Ritka
Hegesedés	Ritka
A pigmentáció megváltozása	Ritka
Túlzott bőrpír vagy duzzanat	Ritka
Fertőzés	Jelentéktelen
Vérömleny	Jelentéktelen

▪ **Enyhén kellemetlen érzés a bőrön**

Noha a házi villanófényes szőrtelenítést általában jól tűrik, a kezelt egyének többnyire enyhén kellemetlen érzést tapasztalnak az eljárás tartama alatt, és ezt a kezelt terület bizsergéseként írják le. Általában ez az érzés az alkalmazás folyamán jelentkezik, vagy még a rákövetkező néhány percre tart. Ha ezen a kellemetlenségen kívül bármilyen egyéb kényelmetlenséget érez, az nem természetes, és azt jelenti, hogy vagy be kell szüntetnie a kezelést intolerancia miatt, vagy azt, hogy túl magas teljesítményértéket állított be.

▪ **Bőrpír**

Bőre kipirulhat közvetlenül a Homelight epilátor használata után, illetve a utána következő 24 órában át. A bőrpír rendszerint 24 óra leforgása alatt megszűnik. Forduljon orvoshoz, ha 2-3 napnál tovább tart.

- **A bőr túlérzékenysége**
A bőr a kezelt részen érzékenyebb, és kiszáradhat, illetve hámlásnak indulhat.
- **Égési sebek vagy sérülések**
Nagyon ritkán a használat következtében a bőrön sebek, vagy égések jelenhetnek meg. A teljes gyógyulásig akár több hétnek is el kell telnie, illetve kivételes esetben sebhely maradhat hátra.
- **Hegesedés**
Noha ezek az esetek nagyon ritkák, maradandó hegek is képződhetnek. A hegek általában (hipotrófiás) felületi sérülésként mutatkoznak. A hegesedés azonban nagy és piros (hipertrófiás), vagy nagy és a sérült területet meghaladó (keloid) formában is jelentkezhet. Komolyabb esztétikai beavatkozásokra válhatnak szükségessé az állapot javításához.
- **A pigmentáció megváltozása**
A Homelight készülék a szőrgyökeret, különösen a szőrhagyma pigmentált sejtjeit kezeli. Fennáll azonban a környező bőr ideiglenes hiperpigmentációjának (pigmentáció fokozódásának vagy barna elszíneződésnek), illetve hipopigmentációjának (kifehéredésének) veszélye is. A pigmentáció módosulásának veszélye nagyobb a sötét bőrű egyéneknél. Általában a pigmentáció módosulása és az elszíneződés ideiglenes jellegű. Maradandó hiperpigmentációs vagy hipopigmentációs esetek ritkán fordulnak elő.
- **Túlzott bőrpír és duzzanat / dagadás**
Ritka esetben a kezelt bőrön túlzott pr és dagadás mutakozhat. Ez a reakció leginkább a test érzékeny részeinél fordul elő. A bőrpírnak és a duzzanatnak 2-7 napon belül el kell múlnia, amennyiben Ön rendszeres időközönként jéggel borogatja. Kíméletes tisztálkodás nem okoz problémát, napsugár hatásának azonban semmi szín alatt nem szabad kitennie az érintett felületet.
- **Fertőzés**
Bőrfertőzés rendkívül ritka, de a Homelight epilátor által előidézett égést vagy bőrsérülést követően előfordulhat.
- **Vérömleny**
Nagyon ritka esetben a Homelight epilátor használata kékes-lilás véraláfutást eredményezhet, mely akár 5 - 10 napig is eltarthat. Amint a kékség felszívódik, a bőr kipirulhat (hiperpigmentáció), és ez a jelenség akár állandósulhat is.

Forduljon orvoshoz, ha a Homelight kezelés alatt vagy után tartósan kényelmetlen vagy kellemetlen érzése van.

5. A Homelight epilátor bemutatása

A BaByliss több mint 25 éve a technológia élén jár, hogy a hölgyek egyre igényesebb és kifinomultabb epilálás iránti követelményeinek megfeleljen. Az IPL (Intense Pulsed Light) villanófényes epilálási technikának köszönhetően, a BaByliss Homelight epilátor finoman és fájdalommentesen távolítja el a nem kívánt szőrszálakat, miközben bőre tartósan sima és selymes lesz.

Ez az epilálási eljárás villogó fényt állít elő, amelyet a melanin (a szőrszálban jelenlévő festékanyag) elnyel, majd a szőrtüszőhöz kerül és ott hővé alakul. Ennek a hőhatásnak a következménye az, hogy a szőrszál és a gyökere fájdalommentesen megese mmisül, és megakadályozza a visszanövését. Ez a tudományosan bizonyított technológia gyors és tartós eredményeket tesz lehetővé.

A BaByliss Homelight epilátor tartós epilálást nyújt teljes biztonságban, az otthoni kezelés intimitása és kényelme mellett.

A Homelight epilátor olyan szőrtelenítő készülék, amely a nem kívánt szőrszálakat eltávolítja a testről (többek között a lábszárakról és a karokról), az érzékeny zónákról (hónalj, bikini), és az arcról (arc, ajkak és áll).

A Homelight epilátor 18 évesnél idősebb férfiaknak és nőknek készült.


5.1. Tartós szőrtelenítési módszer Homelight epilátorral

A Homelight epilátor villanófényvel szőrtelenítő személyes használatra szánt készülék. A fényepilálás egy jól ismert és szabályozott eljárás. A világ minden táján klinikailag tesztelték több mint 15 éven keresztül, és bizonyította hatékonyságát, biztonságosságát, és azt, hogy fokozatosan tartós szőrtelenítést eredményez.

- **Hogyan tudja a fény eltávolítani a szőrszálakat?**

A fényepilálás a szelektív fototermlízis elméletén alapul, amely optikai energia segítségével állítja meg a szőrszálak növekedését. Az ilyen hőhatás eléréséhez a szőrhagymának szelektív módon el kell nyelnie a fényenergiát és hővé kell alakítania. A szelektió úgy valósul meg, hogy a kibocsátott optikai energia túlnyomó részét a szőrhagyma festékanyaga abszorbeálja, míg a bőr és a környező


szövetek hidegek maradnak. A melanin a szőrszálban lévő festékanyag, ez teszi lehetővé a fény elnyelését, majd hővé alakítja, aminek következtében a szőrszálak növekedése leáll. Ezért minél több melanint tartalmaz a szőrszál (azaz minél sötétebb színű), annál jobban el tudja nyelni a fényt, és annál hatékonyabb lesz a fényepilálás.

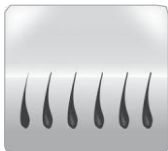

A Homelight epilátoros
kezelés előtt



A Homelight által kibocsátott
impulzus alatt

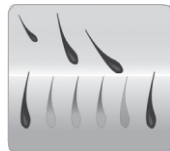


A Homelight epilátoros
kezelés után



A szőrszál növekedési fázisa
Anagén




Átmeneti fázis
Katagén

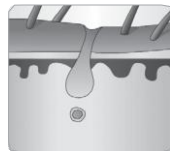

Nyugalmi / alvó fázis
Telogén

▪ **Milyen hatással van a szőrszál növekedési fázisa a fényepilálásra?**

Az emberi test szőrzete három növekedési fázison megy át: az anagén, katagén és telogén fázison. E három fázis fontos szerepet játszik a szőrtelenítés folyamatában. Az anagén fázis a szőr növekedési fázisa, míg a katagén és telogén fázis nyugalmi fázist jelent. A szőrszál növekedési fázisának időtartama a kezdeti fázist a teljes kinövésig egyénekenként változó, valamint függ attól is, hogy a test melyik részén található. Mondhatjuk azonban, hogy átlagosan 18 és 24 hónap között. A legtöbb szőrtüsző egy adott pillanatban a két nyugalmi fázis között van. A Homelight epilátor nincs hatással a szőrszálakra, amikor azok nyugalmi fázisban vannak. Hatással van viszont az anagén fázisban lévő szőrszálakra. A teljes szőrnövekedési fázist figyelembe kell tehát venni ahhoz, hogy a Homelight készülékkel tartós eredményt érjen el.

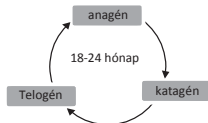

▪ **Jobb eredményeket érhet el, ha megtervezi a Homelight epilátorral a szőrtelenítést**

A szőrnövekedési ciklus átlagosan 18 és 24 hónapot vesz igénybe. Ezalatt számos szőrtelenítést kell elvégezni a Homelight készülékkel ahhoz, hogy tartós eredményeket érjen el. A készülék hatékonysága eltérő az egyéntől, a kezelt területről, a szőrszálak színétől és a készülék használati módjától függően.

5.2. A szőrtelenítés megtervezése

Jobb eredményeket érhet el a Homelight epilátorral, ha megtervezi a szőrtelenítési alkalmakat.

- A Homelight epilátorral végzett első 4 szőrtelenítési alkalom között 2 hét szünetet kell tartani.
- A következő szőrtelenítéseket 4 hetenként kell elvégezni, a kívánt eredmény eléréséig.

1. hónap						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

2. hónap						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

3. hónap						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

4. hónap						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

5. hónap						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

- Ezután alkalmyszerűen kell használnia a Homelight epilátort, amikor a szőr visszanő, mindaddig, amíg a művelet tartós szőrtelenítést nem eredményez. A szőrtelenítési alkalmak között legalább 4 hét szünetet kell tartani.

A szőrtelenítéseket a saját ritmusa szerint tervezheti, és kielégítő eredményeket érhet el. De mi azt javasoljuk, hogy kövesse ezt az ütemtervet, mert kitűnő eredményeket lehet elérni vele.

Ne feledje: Ugyanazon testrész többszöri kezelése két hét alatt nem nyújt jobb eredményt, inkább nem kívánt hatások kockázatát növeli.

Miután a kívánt eredményeket elérte, szintentartó szőrtelenítési alkalmakat tervezhet a Homelight epilátorral.

Hormonális tényezők és fiziológiai változások következtében a nyugalmi állapotban lévő szőrtüszők aktiválódhatnak. Alkalmanként szintentartó szőrtelenítés válhat esetleg szükségessé.

5.3. A szőrtelenítés várható eredményei

Az első eredmények általában a 4. alkalom után válnak láthatóvá, a szőrszálak jelentős csökkenése a 9 - 10 alkalom után tapasztalható. Az eredmény egyénenként változik, a szőrszál típusától és olyan biológiai tényezőktől függően, amelyek befolyásolhatják a szőrnövekedési ciklust. Van, aki az általunk ajánlott átlagos számú szőrtelenítési alkalomnál gyorsabban, vagy kevésbé gyorsan ér el eredményeket. Egy vagy két alkalomtól nem várható tartós eredmény. A szőrtüszők nyugalmi ciklusának időtartama is testtájékonként változik.

Megjegyzés: A Homelight készülék nem hatékony ősz és világos színű szőrszálakra.

5.4. A Homelight készülék leírása

- Kioldó gomb 1
- Alkalmazási felület 2
- Érintés érzékelő 3
- Gomb: ON/OFF + erősségi szint választó 4
- ON/OFF/READY' (BE/KI/KÉSZ) jelzőfény 5
- Az erősségi szintet mutató jelzőlámpák 6
- Védőszemüveg 7
- Erősségválasztási útmutató 8
- Hálózati adapter
- Használati útmutató



5.5. Quartz technológia

A BaByliss Homelight epilátor nagyon nagy teljesítményű villogó lámpával rendelkezik, a Quartz technológiának köszönhetően kivételesen hosszú működési idővel. Ez a technológia páratlan ellenállást biztosít a villogó lámpának, ezáltal nagyon hosszú ideig használható marad. Nem kell utántöltést vásárolni, a benne lévő lámpa több évig eredményesen használható a tartós, hatékony, és kevésbé költséges kezeléshez.

5.6. Biztonság a Homelight epilátorral

A Homelight epilátorral a biztonság elsődleges kérdés

- Az IPL (Intense Pulsed Light) technológia maximális biztonságot és minimális kockázatot kínál

Az IPL technológiával az epilálás során tartós eredményeket lehet elérni, kisebb intenzitással a többi fényepilálási módszerrel összehasonlítva. A Homelight epilátor által felhasznált kis energiamennyiség csökkenti a sérülések, illetve szövődmények valószínűségét, és hozzájárul az ön biztonságához.

- **A Homelight epilátor szemvédő eszközzel rendelkezik**

A Homelight epilátor egy beépített szerkezettel gyártják, mely a szem védelmét szolgálja. A védőeszköz kialakítása olyan, hogy az impulzust nem tudja kibocsátani, ha az epilátort üres hely felé irányítják. A biztonsági szerkezetnek köszönhetően a készülék csak akkor működik, ha az alkalmazási felület a bőrrel érintkezésbe került. Kérjük ne nézzen a kezelt felületre a villanófény tartalma alatt.




Ennek ellenére határozottan ajánljuk, hogy használja a csomagolásban található védőszemüveget a Homelight epilátorral történő kezelés közben.

6. A Homelight epilátor használata

6.1. Az erősségi fokozatot ÓVATOSAN válassza meg!

Az erősségi szint azt az fényerőt határozza meg, melyet a villanófény az Ön bőrére fejt ki a kezelés tartama alatt , a leggyengébbtől (1) a legerősebbig (5) terjedő szintek között).

Az erősségi szintet jelző fények mutatják a kiválasztott szintet. A teljesítmény növelésével jobb eredményt érhet el, ellenben ezzel a mellékhatások kockázata is nő (lásd az „Esetleges mellékhatások” fejezetet).

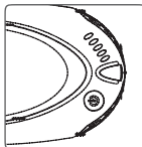

FIGYELEM! Az első használat előtt 48 órával végezzen próbát a lábán (néhány villantást), és használja az 1-es szintet a bőrtípustól függetlenül.


Ha bőre megfelelően reagál a próbára, és nem tapasztalt rendellenes reakciókat vagy kellemetlen érzést a próba utáni 48 óra alatt, a készülék első használata alkalmával az alábbi ábra szerint válassza meg az erősséget:

- Az első szőrtelenítés alkalmával, ha az I. és II. fotótípussal rendelkezik, legfeljebb 3-as erősségi szintre kell állítania a készüléket. A következő szőrtelenítési alkalommal, ha a bőrén nem tapasztalt különösebben kellemetlen vagy kényelmetlen érzést, növelheti a az erősséget 4-es, majd 5-ös szintre.
- Az első szőrtelenítés alkalmával, ha III. vagy IV. fotótípussal rendelkezik, legfeljebb 2-es erősségi szintre kell állítania a készüléket. A következő szőrtelenítési alkalommal, ha a bőrén nem tapasztalt különösebben kellemetlen vagy kényelmetlen érzést, növelheti a az erősséget 3-as, majd 4-es szintre.
- Az első szőrtelenítés alkalmával, ha V. fotótípussal rendelkezik, legfeljebb 1-es erősségi szintre állíthatja a készüléket. A következő szőrtelenítési alkalommal, ha a bőrén nem tapasztalt különösebben kellemetlen vagy kényelmetlen érzést, növelheti a az erősséget 2-es, majd 3-as szintre.
- A Homelight készülék nem alkalmas a VI. fotótípussal rendelkezők számára.



Használat előtt feltétlenül végig kell olvasni az útmutatót, és minden kezeléskor az alábbi táblázat alapján kell kiválasztani a biztonságos erősségi szintet.

A készülék biztonságos használata érdekében az erősségválasztási útmutatót feltétlenül az alábbi táblázat kiegészítéseként kell használni.

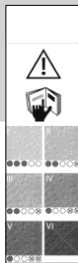

FOTOTÍPUSOK (Fitzpatrick-féle bőrtípusok)

I: Nagyon fehér, tejszerű bőr - Nem barnul le rendszeres napsütéssorán

II: Világos bőr - Gyakori napsütés hatására enyhén barnul

III: Bézs színű bőr - Közepesen leburnul, ha alkalmanként nap éri

IV: Kreol bőr - Könnyen leburnul kevés napsütés esetén

V: Sötét bőr - Nagyon könnyen leburnul kevés napsütés esetén

VI: Fekete bőr

FOTOTÍPUSOK	I	II	III	IV	V	VI
SZŐRTELENÍTÉSEK						
Próba (az első szőrtelenítés 8 előtt 48 órával)	1. szint	1. szint	1. szint	1. szint	1. szint	X
1. szőrtelenítés	3. szint	3. szint	2. szint	2. szint	1. szint	X
Következő szőrtelenítések	4, 5 szint	4, 5 szint	3, 4 szint	3, 4 szint	2, 3 szint,	X

X: a készülék nem alkalmas Önnek, ha bőre a VI. fototípushoz tartozik

Elfordulhat, hogy a szükséges erősségi szint megváltozik, mert ugyanannak az egyénnek a bőrszíne a kezelt bőrfelületen megváltozik. A kar bőre általában jobban ki van téve a napsütésnek, ezért sötétebb például, mint a hónalj.


De vigyázat, mert ha növeli az erősségi szintet a testének világosabb részeinél, jobb eredményt ér el, de növeli a kellemetlen érzés, vagy akár a mellékhatások kockázatát.

6.2. Készítse fel a bőrét a kezelésre




Bőrének borotváltnak, tisztának, púder- vagy dezodor maradványoktól mentesnek kell lennie.

Kérjük, ne szórтеленítse magát (például elektromos epilátorral vagy gyantával) a Homelight epilátor használata előtt. Szórтеленítés (azaz a szőrszál gyökereitől történő eltávolítása) esetén a villanófényel történő kezelés hatástalan lesz.

6.3. A Homelight készülék telepítése és beállítása

1. Vegye ki a dobozból a készüléket és a Homelight epilátor egyéb tartozékait.
2. Csatlakoztassa az adapter vezetékét a készülék hátoldalán erre a célra kialakított helyre.
3. Az adapter másik végét dugja be egy konnektorba. Az „ON/OFF/READY” jelzőfény kigyullad és narancssárga fényel világít.
4. A  gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket. Az „ON/OFF/READY” jelzőfény kigyullad és zöld fényel világít. A szellőzőmotor halk hangja hallható A Homelight epilátor használatra készen áll

Kérjük, viselje a mellékelt védőszemüveget a Homelight epilátorral végzett kezelés közben.

5. A  gomb megnyomása után mintegy 1,6 másodperccel (1. szinten) kigyullad az ON/OFF/READY jelzőfény. A készülék ekkor készen áll az első impulzus kibocsátására. A készülék minimális teljesítményre van állítva. Az 1. erősséget jelző fény kigyullad.
6. Válassza ki a bőrtípusának megfelelő erősségi szintet a különböző fototípusokat bemutató táblázat alapján. Nyomja meg a  gombot egyszer vagy többször a kívánt fokozat kiválasztásához. A kiválasztott erősségi szintet jelző fény kigyullad és zöld színnel világít. Például a 3. erősségi szintnél a 3 első szintet jelző fények világítanak. Ha a 4. szintről például 1. szintre szeretne váltani, nyomja meg a  gombot, ahányszor szükséges: a készülék 4. szintről az 5. szintre vált, majd visszatérünk az 5. szintről a 4. szintre, a 4. szintről a 3. szintre... és így tovább az 1. szintig.
7. Az kezelő felületet nyomja erősen a bőrre, hogy az érintkezés tökéletes legyen. Amint a kezelő felület teljesen érintkezésbe lépett a bőrrel, az „ON/OFF/READY” jelzőfény villogni kezd.

MEGJEGYZÉS : a készülék az érintkezést érzékelő szemvédő eszközzel rendelkezik, ezért csak akkor bocsát ki impulzusokat, ha teljesen érintkezik a bőrfelszínnel. Ha nem érintkezik teljesen, a készülék nem bocsát ki fényimpulzust. Ügyeljen tehát arra, hogy bőrre megfelelően ráhelyezze a készülék kezelő felületét.

8. Nyomja meg a kioldót. A készülék fényimpulzust bocsát ki. Megtörténhet, hogy Ön enyhe elmelegedést és bizsergést érez.

9. Távolítsa el az alkalmazási felületet a kezelt bőrrésztől.

10. Helyezze át az alkalmazási felületet egyéb kezelendő testrésze. A bőrére rányomott kezelő felület által hagyott látható nyomok segíthetik Önt abban, hogy az újabb impulzus kibocsátását helyesen irányítsa anélkül, hogy az impulzusok átfednék egymást, illetve egymástól túl távol esnének. (lásd „A teljes kezelési terület lefedése »). A Homelight készülék az egyes impulzusok között azonnal újratöltődik. 1,6 másodperc múlva (1. szinten) az „ON/OFF/READY” jelzőfény ismét kigyullad. A készülék ekkor készen áll az kezelő impulzus kibocsátására.



**Figyelem! Ne kezelje a bőr azonos területét egymás után egy szőrtelenítési alkalommal!
A kezelés egyazon helyen történő ismételt alkalmazása fokozza a mellékhatások kockázatát.**

6.4. Használati módok

▪ PRECÍZIÓS MÓD

A fenti 7 - 10. pontokban bemutatott precíziós mód a test legnehezebben elérhető és érzékeny részeinek biztonságos kezelését teszi lehetővé (arc, hónalj, bikinivonal stb.).

▪ CSÚSZÁS mód

Ha a kezelő felületet megfelelően a bőrre helyezi és a készülék kioldó gombját folyamatosan nyomja, a készülék használója bekapcsolhatja a Gliss (csúszás) módot (folyamatos percenkénti 36 impulzus, 1. szinten). Így az impulzusok automatikusan, folyamatosan keletkeznek, minden további beavatkozás nélkül. Könnyen csúsztathatja a készüléket a bőrén, megszakítás nélkül, lassú és folyamatos, fel-le mozdulatok nélküli mozdulatokkal.

Megjegyzés:

- Ha felemeli a készüléket és közben benyomva tartja a kioldó gombot, a csúszás üzemmód aktív marad. De biztonsága érdekében impulzus csak akkor szabadul fel, ha a készülék teljesen érintkezik a bőrével. Ügyeljen arra, hogy a készülék kezelő felületének kerületét alkotó érintkezés érzékelő tökéletesen és erősen rányomódjon a bőrére, hogy a csúszás üzemmódban biztosítsa a folyamatos villanások működését. Ellenkező esetben 5 másodperce van arra, hogy beállítsa a készüléket, hogy az teljesen érintkezzen a bőrével, közben tartsa folyamatosan lenyomva a kioldó gombot. Az 5 másodperc elteltével, ha a bőrrel nem érintkezik teljesen, a csúszás üzemmód kikapcsolódik, és a folyamat újratekésítéséhez fel kell engednie, majd ismét lenyomnia a gombot.
- Ha úgy emeli fel a készüléket, hogy közben felengedi a kioldó gombot, a csúszás üzemmód kikapcsolódik.

A csúszás üzemmód a készülék használatában már bizonyos tapasztalattal, megfelelő ügyességgel rendelkező felhasználóknak való. A percnkénti 36 impulzussal (1. szinten) a csúszás üzemmód a test nagyobb felületeinek biztonságos és gyors kezelését teszi lehetővé: láb, hát, kar, törzs. Az érzékeny zónákra és az arcra használja a precíziós módot.

A készülék automatikus kikapcsolása

Ha a felhasználó több mint 10 percen át nem használja a készüléket, automatikusan kikapcsol. Az „ON/OFF/READY” jelzőfény kigyullad és narancssárga fénnel világít. A készülék újabb használatához a felhasználónak meg kell nyomnia a gombot és ismét be kell állítania a készüléket a választott erősségi szintnek megfelelően.



Kerülje az impulzusok átfedését!

Egy szőrtelenítés alkalmával csak egyszer kezeljen egy területet!

A kezelési terület lefedése

Az impulzusokat sorban kell alkalmazni az egyik végponttól a másikig, rendszeresen és egymás utáni sorrendben. Ez a módszer biztosítja az impulzusok legjobb ellenőrzését és segíti Önt abban, hogy a kezelt területet a legjobban lefedje és elkerülje az impulzusok átfedését, illetve az impulzusok túl közeli alkalmazását ugyanazon a területen.

A bőrre rányomott kezelő felület által hagyott látható nyomok segíthetik Önt abban, hogy az újabb impulzus kibocsátását helyesen irányítsa anélkül, hogy az impulzusok átfednék egymást, illetve egymástól túl távol esnének.



AZONNAL SZÜNTESSE BE a kezelést, ha a bőrön égés vagy hólyag látható!

6.5. Az arc szőrtelenítése a Homelight epilátorral



Nagyon fontos, hogy ne nézzen a kezelt területre a villanófény tartama alatt, és viselje a mellékelt védőszemüveget a Homelight epilátorral végzett arckezelés alatt.

Ne használja szempillák, haj és szemöldök eltávolítására.

Ez a termék nem alkalmas a férfi szakáll teljes eltávolítására.



Kényelme és biztonsága érdekében azt javasoljuk, hogy vegye igénybe valaki más segítségét az első néhány alkalommal, amikor a Homelight készüléket az arcon használja.

A PRECÍZIÓS módot kell használni az arc szőrtelenítésénél.

NE HASZNÁLJA A CSÚSZÁS MÓDOT AZ ARCRA ÉS AZ ÉRZÉKENY ZÓNÁKRA.



Az arc kezelésénél feltétlenül fontos 5 másodpercet várni az egyes villanások között. A Homelight készülékkel az arc szőrtelenítésének időtartama ne tartson 10 percnél tovább.

6.6. A szőrtelenítés megközelítő időtartama


Terület	Átlagos időtartam	Üzem mód
Lábszár	8-10 perc	Csúszás
Láb	15 percnél tovább	Csúszás
Bikínivonal	2 percnél tovább	Precíziós
Hónalj	1 perc	Precíziós

6.7. Mire számíthat a Homelight epilátor használatakor?

Előfordulhat, hogy a Homelight epilátor otthoni használata sokak számára új tapasztalatot jelent a fényvel történő szőrtelenítés terén. A Homelight epilátor könnyen kezelhető, és a szőrtelenítő kezelések rövid ideig tartanak. Íme, mit láthat, hallhat, illetve érezhet normál lefolyású kezelés alatt:

- **A szellőzőmotor hangja** – a Homelight szellőzőmotor halk hangja hallható. Ez normális jelenség.
- **Az alkalmazási felület nyomása által hagyott nyom** – szükséges és hasznos a szomszédos területekre történő helyezéshez; ez a Homelight epilátor biztonsági szerkezetének sajátossága.
- **Melegedés és bizsergés érzése** – Természetes, ha az egyes impulzusok mérsékelt melegedést és bizsergést váltanak ki, ami a fényenergiának tudható be.
Ne feledkezzen meg arról, hogy fontos minimális teljesítményt használni az első kezelések alkalmával. A melegedés érzése a szőrtelenítési kezelés után egy óráig fennmaradhat.
- **Enyhén kipirult vagy rózsaszínű vált bőr** – Közvetlenül használat után, vagy a rákövetkező 24 órában nem megy ritkaságszámba az, ha a bőr enyhén kipirul vagy rózsaszínű válik, különösen a szőrszálak körül.
Ha a bőrpír, felhólyagzás vagy égés mértéke szembeötlő, azonnal szüntesse be a Homelight epilátor használatát.

6.8. A Homelight epilátorral végzett kezelés után.

- A Homelight epilátorral végzett kezelés után kapcsolja ki a készüléket a  gombbal.
- Húzza ki az adaptert a konnektorból.

- A Homelight epilátort, különösen az alkalmazási felületet ajánlatos minden egyes alkalom után tisztítani (lásd a „Homelight epilátor tisztítása” című fejezetet).
- A készülék tisztítása után azt ajánljuk, hogy tegye a dobozába, és tartsa minden vízforrástól távol.



A bőr ápolása szőrtelenítés után

Ne tegye ki napsugár hatásának a kezelt részeket. Védje bőrét napvédővel a kezelés teljes tartama alatt, és legalább két hétig a Homelight készülékkel végzett utolsó kezelést követően.

Ne használjon illatosított krémet vagy dezodort a szőrtelenítés után a kezelt területekre.



Mellékhatások és szövődmények

A Homelight epilátorral történő kezelés egyeseknél a pigmentáció elváltozását idézi elő. Ezek a hatások, amennyiben előfordulnak, általában könnyű lefolyásúak és átmenetiek.

Szövődmény jelentkezése esetén (lásd „Esetleges mellékhatások”) , azonnal szüntesse be a készülék használatát és forduljon haladéktalanul orvoshoz.

7. A Homelight készülék karbantartása

7.1. A Homelight epilátor tisztítása

A Homelight epilátort, így különösen az alkalmazási felületet, ajánlatos minden egyes kezelési alkalom után tisztítani.

Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból.

Kíméletesen törölje le a készülék felületét, különösen az alkalmazási felületet, száraz és tiszta ruhával, valamint elektronikus berendezések tisztítására alkalmas tisztítószerrel.

Soha ne merítse vízbe a Homelight készüléket vagy bármelyik alkatrészét!

7.2. A Homelight epilátor működési ideje

A Homelight epilátor kivételes élettartammal rendelkező villogó lámpája energiacsökkenés nélkülű szabadítja fel minden fényimpulzusát.

Amikor a készülék már nem használható, az ON/OFF/Ready jelzőfény piros fénnel világít.



Ne használja a készüléket, ha nagy foltok jelennek meg a villogó lámpa belsejében, vagy ha a kezelő felület törött. Forduljon a BaByliss vevőszolgálatához.


8. Hibaelhárítás

8.1. A Homelight epilátor nem működik

Ellenőrizze, hogy az adapter megfelelően csatlakozik a Homelight epilátorhoz, valamint a hálózati aljzathoz.

8.2. Nincs impulzus a kioldó lenyomásakor

Ellenőrizze, hogy a kezelő felület egyenletesen és erőteljesen érintkezik-e a bőrrel, és az „ON/OFF/Ready” jelzőfény villog; ez a fényjelzés mutatja a teljes érintkezést a bőrrel. Biztonsága érdekében a kioldó csak akkor engedélyezi impulzus kibocsátását, ha az kezelő felület jól rányomódik a bőrre.

- Győződjön meg arról, hogy az „ON/OFF/Ready” jelzőfény kigyulladt.
 - Ha 10 másodperc elteltével sem világít az „ON/OFF/Ready” lámpa, kapcsolja ki és kapcsolja ismét be a Homelight epilátort a gomb  kétszeri megnyomásával.
 - Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi BaByliss ügyfélszolgálathoz.
- Az 'ON /OFF/Ready' jelzőfény pirosan világít és villog
 - A készülék biztonsági módba került, mert túlemelegedett, vagy kritikus problémát észlelt (töröttventilátor, kondenzátor probléma stb...). Ilyenkor kapcsolja ki a készüléket. Hagyja lehűlni 15 percig, mielőtt ismét bekapcsolja.
 - Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi BaByliss ügyfélszolgálathoz.
- Az 'ON/OFF/Ready' jelzőfény zöld és piros fényel villog felváltva.
 - A Homelight készülék hálózati konnektorhoz való csatlakoztatására használt adapter nem a készülékhez mellékelt adapter, vagy meghibásodott.
 - Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi BaByliss ügyfélszolgálathoz.
- Az „ON OFF/Ready” jelzőfény pirosan világít.
 - A készülék már nem használható.



Ne próbálja felnyitni vagy saját maga megjavítani a Homelight epilátort. Csak engedélyezett szervizek végezhetnek javítást.

Ha felnyitja a Homelight epilátort, veszélyes elektromos alkatrészek és fényimpulzus-energia kockázatának teszi ki magát, ami súlyos testi sérülést és / vagy gyógyíthatatlan szemkárosodást okozhat.

A Homelight epilátor felnyitásával károsodhat a készülék, és érvénytelenné válhat a jótállás.

Ha készüléke eltört, sérült, vagy javításra szorul, kérjük, forduljon a BaByliss ügyfélszolgálatához.

9. Ügyfélszolgálat

A Homelight termékekről további információkat olvashat, ha ellátogat a www.babyliss.com honlapra

Ha készüléke törést vagy károsodást szenvedett, illetve javításra szorul, vagy ha Önnek bármi segítségére is lenne szüksége, forduljon, kérjük, a BaByliss ügyfélszolgálatához.

10. Gyakran ismételt kérdések

1. Valóban hatékony-e a Homelight epilátor?

Igen. Klinikai vizsgálatok bizonyították, hogy a BaByliss által gyártott Homelight epilátorral tartós eredményeket lehet elérni, teljes biztonság mellett.

2. Mely testrészekben használható a Homelight epilátor?

A BaByliss Homelight készüléke a testszőrzet eltávolítására szolgál. A Homelight epilátorral leggyakrabban kezelt területek: a lábak, a hónalj, a kar, a bikinivonal és az arc (arc, felső ajak és áll).

3. Mennyi ideig tart a Homelight epilátorral történő szőrtelenítés?

Lásd a 6.6. pontot a kezelés megközelítő időtartamáról

4. Biztonságos-e a Homelight epilátor?

A Homelight epilátor tervezésénél az Ön biztonságát tartottuk elsősorban szem előtt. Nagyon szigorú előírások alapján tesztelték és hagyták jóvá a készülék otthoni használatát (a bőr tűrőképességét bőrgyógyászati ellenőrzés mellett tesztelték). De mint minden olyan villamos berendezés esetén, mely bőrrel kerül érintkezésbe, a felhasználónak az utasításokat és a munkabiztonsági meghagyásokat szigorúan be kell tartania.

5. Fájdalmas a Homelight epilátorral végzett kezelés?

Megfelelő használat esetén a Homelight epilátor felhasználói nyihe melegérezetről számolnak be a fényimpulzus pillanatában. A sötétebb és erősebb szálú szőrzettel rendelkező használók kissé több kellemetlenséget éreznek. De ezek az érzések csillapodnak, és a kezelés vége felé megszűnnek. Kényelme és biztonsága érdekében a Homelight epilátor 5 erősségi szinttel rendelkezik, bőrtípusától függően.

6. Milyen gyakran kell a Homelight epilátort használni?

A Homelight epilátorral végzett első 4 szőrtelenítési alkalom között 2 hét szünetet kell tartani. A következő szőrtelenítéseket 4 hetenként kell elvégezni, a kívánt eredmény eléréséig.

7. A Homelight epilátor hatásos ősz, szürke, vagy szőke szőrzet esetén?

A Homelight epilátor sötét vagy több melanint tartalmazó szőrzet esetén a leghatékonyabb.

A melanin, azaz a szőrzet színét meghatározó festékanyag abszorbeálja az optikai energiát. A fekete és a sötétbarna szőrzet reagál legjobban a kezelésre. A barna és világosbarna szőrszálak is reagálnak ugyan, de több szőrtelenítési alkalmat igényelnek. A vörös szőrzet is reagálhat részlegesen a kezelésre. Általában a fehér, szürke és szőke szőrszálak nem reagálnak a kezelésre, de néhány felhasználó ért el eredményeket több szőrtelenítési kezelés után.

8. Használhatom-e a Homelight epilátort barna vagy fekete bőrön?

Ne használja a készüléket természetserűleg sötét bőrön! A Homelight epilátor a szőrszálakat a

bennük lévő festékanyag alapján távolítja el.A festékanyagok változó mennyiségben megtalálhatók a környező bőrszövetekben is.

Az ember bőrében lévő festékanyag mennyisége a bőr színéről látható, és ennek segítségével megállapítható, hogy milyen mértékű kockázatnak teszi ki magát a Homelight epilátor használatával.Sötét bőr kezelése a

Homelight epilátorral kockázatos lehet, például égés, hólyagosodás és a bőr színének elváltozása (hiper- vagy hipopigmentáció).Kérjük, olvassa el a különböző fototípusokat tartalmazó táblázatot és az ezek alapján ajánlott használatot a „Homelight epilátor használata” című fejezetben.

9. Mikor jelentkeznek az első eredmények a BaByliss Homelight szörtelenítőjének használatával?

Mint bármilyen más fotolepítés módszernél, az eredmények nem mutatkoznak azonnal; még olyan benyomása is lehet, hogy semmi nem történt. Olykor úgy tűnhet, hogy a szörzet a szörtelenítési alkalom után tovább nő, de két hét elteltével a szóban forgó szörzet többnyire egyszerűen kihull.

A szőrnövekedésnek három fázisa van, és csak az aktív fázisban lévő szörzetre hat a Homelight epilátor. Ezért van szükség több szörtelenítési kezelésre a kívánt eredmény eléréséhez.

10. Férfi használhatja-e a Homelight epilátort?

A Homelight epilátort férfiak is használhatják. A férfiak szörzete, különösen a felsőtest szörzete azonban több alkalmat igényel a kívánt eredmény eléréséhez.

11. Miért nő vissza a múlt héten kezelt testrészen a szörzet?

Gyakran a szörzet azt a benyomást kelti, hogy tovább nő a Homelight epilátorral történő szörtelenítési alkalom utáni 1-2 hét tartama alatt. Ez a folyamat a „kiodobás” Két hét után azonban tapasztalni fogja, hogy ezek a szőrszálak kihullnak, vagy elválnak a szörtüszőtől.

De nem ajánljuk, hogy húzogatva leválassza a szőrszálakat, várja meg, míg maguktól kihullnak. Ezen kívül egyes szőrszálakra nem hat a Homelight epilátor, vagy a helytelen alkalmazás miatt, vagy azért, mert a szőrszál nyugalmi fázisban volt. Ezeket a szőrszálakat a következő alkalommal kell kezelni, ezért fontos többször elvégezni a Homelight epilátorral a kezelést ahhoz, hogy a kívánt eredményt elérjük..

12. Hallottam olyat, hogy egyes szőrszálak világosabban és vékonyabban újránőttek a fényepilálás után?

Ezt a jelenséget jól ismerik a villanófényes kezeléssel szörtelenítő kozmetikusok és orvosok. Előfordulhat, hogy egyes szőrszálak világosabban és vékonyabban újránőnek a Homelight epilátoros szörtelenítés után. Általában ezek a szőrszálak az eredeti szörzetnek csak nagyon kis részét alkotják, folytatni kell tehát a kezelést a kívánt eredmény eléréséhez.

13. Veszélyt jelent-e bőrömrre nézve a Homelight epilátor hosszú távú használata?

A villanófény orvosi kozmetikában való használatáról nagyon sokat írtak az utóbbi 15 évben a szakfolyóiratok. Ezek a folyóiratok és intézmények nem számoltak be mellékhatásokról vagy sérülésekről a villanófény tartós használata kapcsán.

14. Használhatom-e a Homelight epilátort az arcomon vagy az államon lévő szőrszálak eltávolítására?

A Babylliss Homelight epilátor használható az arcszőrzet kezelésére (arc, felső ajak és áll).A Homelight epilátort azonban nem szabad használni szemöldök, szempilla vagy haj eltávolítására.Kérjük, használat közben vegye fel a mellékelt védőszemüveget.

15. Mennyi ideig kell várnom arra, hogy a Homelight epilátort használhassam, ha a napsugarak hatásától nem óvtam magam?

A Homelight epilátor használata előtt és után kerülni kell a napsütést, függetlenül attól, hogy a test melyik részének kezeléséről van szó. Megfelelően kell védekeznie, például fedett ruházattal, vagy napvédő krémmel (50 + napvédő faktor), és ezt rendszeresen használni kell 3 héttel a kezelés előtt és után. Ideális esetben 4 hetet kell várnia a Homelight epilátor használata előtt, ha védelem nélkül volt kitéve a nap hatásának. Ha bármilyen kétsége lenne a naphatás tekintetében, forduljon orvosához vagy lépjen kapcsolatba a BaBylliss ügyfélszolgálatával.

16. Mit kell tennem a Homelight epilátor használata előtt?

A Homelight epilátorral végzett minden kezelés előtt fontos, hogy ne érje napsütés a kezelendő részt legalább négy héten át. Magas védőfaktorú napvédő (50+ faktor), illetve a kezelendő területet lefedő ruházat használata segíthet. Ezen kívül a kezelendő területet előtte vízzel és szappannal le kell mosni, és a szőrzetet frissen le kell borotválni.

17. Hogyan kell karbantartani a kezelt területet a Homelight epilátor használata után?

A Homelight epilátorral kezelt területet megfelelő bőrápoló készítményekkel lehet tisztítani és ápolni. Különlegesen óvatosnak kell lenni, hogy ne érje védelem nélkül a bőrét a nap. A magas faktorú (50+ védőfaktor) napvédő készítmények és a hosszú ruhák jó védelmet nyújtanak a nap ellen.

18. El kell-e távolítani a szőrszálakat a kezeléseik előtt, közben és után?

Nem, ne szőrtelenítsen a kezeléseik előtt, közben és után. A szőrszálak maguktól fognak természetesen és fokozatosan kihullani. Ez a fázis mintegy két hétig is eltarthat.

11. Műszaki adatok

Hatáspont, specifikáció	$3,0 \times 1,0 \text{ cm} = 3,0 \text{ cm}^2$
Ismétlési arány	1. szinten egy impulzus 1,6 másodpercenként, 5. szinten egy impulzus 3,5 másodpercenként
Fényerősség	1. szinten: 2 J/cm^2 2. szinten: $2,5 \text{ J/cm}^2$ 3. szinten: 3 J/cm^2 4. szinten: $3,5 \text{ J/cm}^2$ 5. szinten: 4 J/cm^2
Hullámhossz	550 - 1200 nm
Szükséges elektromos hálózat	100 - 240 V AC, 3 A

12. Csomagolás - Címkézés

Elektromos és elektronikus hulladék 

CE jelzés

Tartsa be a használati utasítást

Nedvesség elleni védelem: szokásos

A készülék nem használható gyúlékony érzéstelenítő és levegő, oxigén vagy nitrogén-dioxid keverékének jelenlétében.



Magyar
G34E

BABYLISS SARL
99, Avenue Aristide Briand
92120 Montrouge - FRANCIAORSZÁG
www.babyliss.com